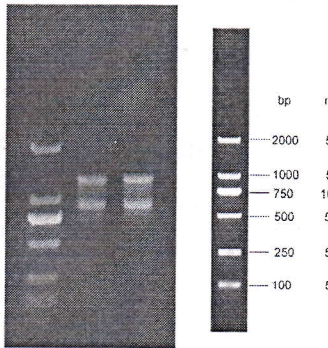


质检报告单

请检编号	20200611	请检日期	2020.06.15	请检人	李春					
生产日期	2020.06.15	抽检比例	1/1000	产品序号	—					
产品批号	20200611	产品名称	Carrier RNA (1.35 mg 定制)							
说明: 产品符合要求, 打“√”, 不符合要求打“×”, 如果需要数据说明, 或者不符合要求, 在备注中注明详细内容。										
编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
要求										
外观要求	√									
纯度要求	√									
浓度要求	√									
电泳要求	√									
备注	本批次共生产 1.35 mg 装 40 支, 抽检一支。 OD₂₆₀ 2.694 OD₂₈₀ 1.309 OD₂₆₀/OD₂₈₀ = 2.06 浓度: 1.077 μg/μl									
检验结果	 bp ng — 2000 50 — 1000 50 — 750 100 — 500 50 — 250 50 — 100 50 质检员: 郝静雅									
审核意见										

Carrier RNA 检验方法

1. 抽检方法:

每批成品中按 1/1000 的比例随机抽取; 如本批 Carrier RNA 少于 1000 支的, 抽取 1 支检验。

2. 外观检验:

- (1) 产品外观不允许有缺损、变形、污渍。
- (2) 产品批次与送检单相符。
- (3) 产品的组成与说明书相符。

3. 浓度与纯度检验:

- (1) 向 Carrier RNA 中加入 1.35 ml RNase-free 水, 旋涡振荡 5 分钟充分溶解 RNA。
- (2) 取 RNase-free 水作为空白在 Sim-100 超微量分光光度计上调零。
- (3) 取 10 μ l Carrier RNA, 溶解于 90 μ l RNase-free 水, 制成稀释十倍的 Carrier RNA。
- (4) 取 2 μ l 稀释十倍的 Carrier RNA, 在 Sim-100 超微量分光光度计上测量, 读取并记录 OD260、OD280 及浓度值。

4. 电泳检验:

电泳检验操作步骤

在 1%琼脂糖凝胶上, 按下表依次加入 DNA Ladder 和稀释十倍的 Carrier RNA, 电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

电泳加样顺序:

	DL 2000 Ladder	检验 1	检验 2
Marker/Carrier RNA	5 μ l	5 μ l	8 μ l
6 $\times$ Loading Buffer	--	2 μ l	2 μ l

5. 判断规则:

合格产品:

- (1) 抽检的 Carrier RNA 外观检验符合要求。
- (2) Carrier RNA 的浓度大于 1 μ g/ μ l。
- (3) Carrier RNA 的 OD₂₆₀/OD₂₈₀ 大于 1.95。
- (4) 电泳检验, 无肉眼可见的基因组 DNA 条带。
- (5) 电泳检验, RNA 片段无明显降解。

上述任何一项指标未达到要求即判为不合格产品。