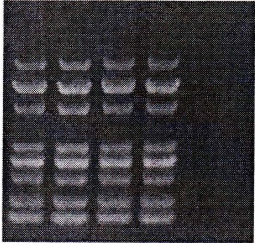




杭州新景生物试剂开发有限公司
地址：浙江省杭州市西湖科技经济园西园一路8号4幢5楼
邮编：310030 电话：0571-87381295 传真：0571-87381297

DL 5000 Ladder 质检报告单

XJ-QR-016

请检编号	20250821	请检日期	2025.08.27	请检人	黄芳
生产日期	2025.08.27	抽检比例	1/1000	产品序号	MD1013
产品批号	20250821	产品名称	DL 5000 Ladder		
填写说明： 内容须用数字填写；如果无法用数据填写，则打“√”表示产品符合要求，打“×”表示产品不符合要求，如果不符合要求，在备注中注明不符合项的详细内容。					
样品 要求（指标）	检验 1	检验 2	对照 1	对照 2	
试剂盒外观 与组成	√	√	√	√	
电泳检测	√	√	√	√	
备注	本批次共生产 40ml。				
检验结果	 合格 质检员：倪晨杰				
审核意见	 审核人：计亚鹏 				

DL 5000 Ladder 检测方法

一、 目的

通过对 DL 5000 Ladder 电泳测试，判断送检的产品是否符合质量要求。

二、 材料、试剂及仪器

- (1) 材料：送检 DL5000 Ladder、对照其他批次的 DL 5000 Ladder。
- (2) 仪器：移液枪、电泳仪、电泳槽。

三、 电泳检测步骤

在 1%琼脂糖凝胶上，按下表依次加入送检和对照 DL5000 Ladder、阴性对照（ddH₂O 与 2×核酸染料 1:1 混合物）电泳结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

电泳加样顺序：

	对照 90%	检验 100%	对照 100%	对照 110%	阴性对照
DL 5000 Ladder	4.5μl	5μl	5 μl	5.5μl	5μl

四、 质量要求与判断方法：

- 1) 试剂包装外观必须无破损、污渍；试剂组成必须与说明书对应一致；试剂标签内容必须与送检单相符。
- 2) 送检 DL 5000 Ladder 有 8 条清晰的亮带与对照组一一对应、无杂带、无拖尾，阴性对照无明显条带出现。
- 3) 送检 DL 5000 Ladder 电泳条带亮度与对照 DL 5000 Ladder 无明显差异。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。

